

ヘルシオンのおすすめポイント

POINT

温熱治療器として認証取得

4つの治療効果が追加されます



POINT

季節コース対応

季節に合ったコースが選べます



POINT

軽くなって上げ下げ便利

商品の軽量化を行いました

| | |
|-------|---------------|
| ヘルシオン | ヘルシオン 約4.8kg |
| リケア | リケア 約5.4kg |
| | リケアグラン 約8.6kg |



POINT

衛生加工で清潔

側地には衛生加工をほどこしています

ヘルシオン

PRO×Block™



抗菌加工


POINT

事前に温めることが出来ます

スマートフォンで操作できます



乾燥機能

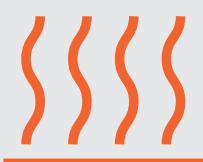

ふとん本体にこもった湿気を取り除くための機能

※乾燥機能中は、ふとんの中に入らないでください。

エラー表示機能

| 点滅ランプ | 想定される異常発生原因 |
|-------|-----------------------|
| 温熱 | 主に、高温異常検知回路が作動したとき |
| 冬コース | 主に、低温異常検知回路が作動したとき |
| 電位 | 主に、断線検知回路が作動したとき |
| 夏コース | 主に、コネクタはずれ検知回路が作動したとき |

機器に異常が生じた場合は、操作器のランプが点滅し、異常状態を上記のようにお知らせします。

簡単安心度チェック



電磁環境対応型 家庭用電位治療器
Re:care.
リケア

ドクターセラ

寝心地はいかがですか?

まだ温かいですか?

あてはまる項目の□にチェックを入れてください。 記入例

1. 生地が疲れていませんか?

- 生地に破損(破れ、切れなど)した箇所がある。
- 生地が汚れている。

※破損した部分の発熱体や電床シートが部分的に劣化している
恐れがあります。



汚れ

破れ

切れ

2. 折りたたみ部分に異常がありませんか?

- 折りジワが固くなっている。
- 折り部分のわたが少なくなっている。(わた切れ)

※折りジワの個所で発熱体や電床シートが折り曲がり高温になる可能性があります。



強い折りジワがついたもの

3. 中わたが疲れていませんか?



- 中わたが硬化している。
- 全体的に薄く、コシがなくなっている。

※中わたの硬化やへたりでわたのクッションがなくなり、発熱体や電床シートが部分的に劣化している恐れがあります。



コシがなくなったもの

4. コントローラーの動作に異常はありませんか?



- ランプが点滅、もしくは点灯が不安定。
- 温度調節レバー(ダイヤル)が空回りする。
- 温度調節が正しく作動しない。



※コントローラーが故障したままのご使用を続けると危険です。



5. コードの損傷はありませんか?

- 内部の線(赤・黒・緑)がむき出しになっている。
- コードが鋭角に折れ曲がっていて直らない。
- コードが切れかかっている。

※コードに損傷があるとショートし発火の可能性があります。

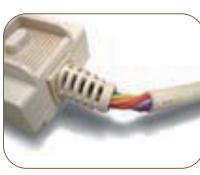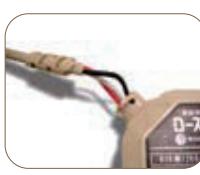

折れ曲がったもの

コードが露出しているもの

6. 永年ご使用していませんか?

- 10年以上使用している。

※経年劣化の可能性があります。



1つでも当てはまる項目がある方は、ご相談ください。

● お問い合わせは当店まで!

通電している間は大丈夫!
と思っていませんか?